

オートクレーブ対応カメラシステム

MH-STP01 洗浄手順書

当手順書では、下記該当製品の取り扱いにおける洗浄処理に関する一般的な手順をご案内いたします。

対象製品：MH-STP01(高圧蒸気滅菌対応ハウジング) / TG-7,TG-6(装填用カメラ)

【MH-STP01 洗浄手順】

① 洗浄準備

- ・使用後のハウジング
- ・中性洗剤 ・スポンジ ・ブラシ

② ハウジングに装填されているカメラは、取り出さずに水洗いを行ってください



- ※血液や液体の汚れが付着した場合は、使用後すぐに洗浄を行ってください
- ※ハウジングの洗浄には、中性洗剤が使用可能です

③ スポンジを用いて、十分に泡立てて洗浄を行ってください



- ※ボタン/ダイヤル部分の隙間は、ブラシを用いて洗浄を行ってください



④ 十分に洗浄を行ったら、流水ですすいでください



⑤ タオルやガーゼで水気をしっかりと拭き取ってください



⑥ ハウジングからカメラを取り出して、十分に乾かしてください



- ※装填用カメラ (TG-7,TG-6) は防水性能に優れている為、流水で洗うことも可能です



- カメラを洗浄した場合は、水気をしっかりと拭き取り、十分に乾かしてください

— 洗浄は以上で完了です —

【洗浄時の注意事項】


- ① ハウジングを開けたままでの洗浄は、故障の原因となる可能性があります



※内部の汚れは布やガーゼで拭き取ってください

※アルコールも使用可能です

- ③ カメラの洗浄に洗剤を使用すると故障の原因となる可能性があります

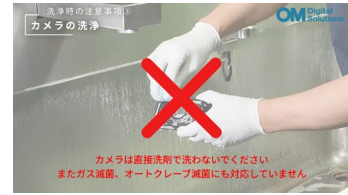

※カメラはオートクレーブ滅菌、ガス滅菌に対応していません

- ② ハウジング、カメラの洗浄に洗浄機を使用しないでください
故障の原因となる可能性があります



<ご参考：使い方動画 URL>

■使い方動画 ～装着と撮影編～ (3:32)



0:06 セット方法

1:10 撮影方法



■使い方動画 ～準備編～ (4:32)



0:58 初期設定

2:38:オートクレーブ滅菌方法



■使い方動画 ～使用後の洗浄方法～ (3:00)



0:14 洗浄方法

1:24 洗浄時の注意事項



お問い合わせ先：ご購入販売店もしくは OM デジタルソリューションズ株式会社までご連絡ください。

〒192-0033 東京都八王子市高倉町 49-3 電話: 042-642-5309 メールアドレス: biz-info@om-digitalsolutions.com