

オートクレーブ対応カメラシステム

MH-STP01 滅菌手順書

当手順書では、下記該当製品の取り扱いにおけるオートクレーブでの滅菌処理に関する一般的な手順をご案内いたします。実際に利用されるオートクレーブ機器のマニュアルと合わせ、正しくご利用ください。

対象製品：MH-STP01(高圧蒸気滅菌対応ハウジング) / MH-GP01(ガイドユニット)

【オートクレーブ滅菌手順】

①ガーゼの上に開いておく



②ガーゼで包む



③ガーゼを挟みこみ、閉まらない状態にする



注意：閉じた状態でオートクレーブにかけると壊れます



④オートクレーブ機器指定の滅菌パックに入れる



⑤ガイドユニット(MH-GP01)も滅菌パックに入れる



⑥オートクレーブにかける



⑦滅菌後、手で持てる温度になったら取り出す



【セッティング参考手順】 MH-STP01

※所属組織のルールに従い安全にお取り扱いください

①清潔な手でカメラを開いて置く



②ガイドユニットを開いて被せる



③カメラをセットする (※カメラは不潔です)



ガイドユニット利用により、
コンタミを防ぎます。

④ガイドユニットを外す




⑤清潔な手で閉じる



⑥完成



■操作ボタン説明

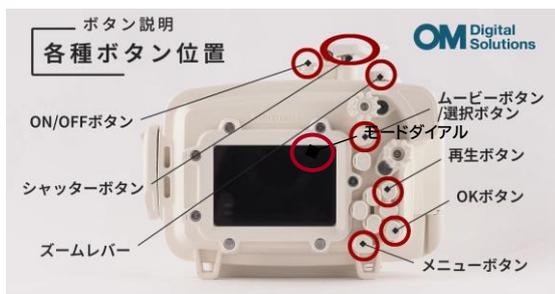

品名	高圧蒸気滅菌対応ハウジング	ガイドユニット
型番	MH-STP01	MH-GP01
対応機種	Tough TG-6, TG-7	MH-STP01
材質	ポリフェニルサルホン樹脂	アルミ
保存環境		-20℃～60℃
気密性	水深5m相当	-
サイズ(mm)	157×121×80 (幅×高さ×奥行き)	収納時: 184×144.5×43.5
質量(g)	425 デジタルカメラ、付属品含まず	238
耐高圧蒸気滅菌能力*	121℃ 15分 500回相当 / 132℃ 4分 500回相当	

*弊社評価方法により、上記条件で高圧蒸気滅菌処理を行い問題ないことを確認しています。

<ご参考：使い方動画 URL>

■使い方動画 ～装着と撮影編～ (3:32)



0:06 セット方法

1:10 撮影方法



■使い方動画 ～準備編～ (4:32)



0:58 初期設定

2:38:オートクレーブ滅菌方法



お問い合わせ先：ご購入販売店もしくは OM デジタルソリューションズ株式会社 新事業開発室 までご連絡ください

〒192-0033 東京都八王子市高倉町 49-3 電話: 042-642-5309 メールアドレス: biz-info@om-digitalsolutions.com